

**signia**

# StreamLine Mic

Korisničko uputstvo



# Sadržaj

<b>Pre nego što počnete</b>	<b>5</b>
Uvod	5
U sadržaju paketa	10
Komponente	12
<b>Prvi koraci</b>	<b>14</b>
Punjenje	14
Uparivanje slušnih aparata	17
Uparivanje vašeg smart telefona ili muzičkog plejera	19
Brisanje uparivanja	21

<b>Svakodnevna upotreba</b>	<b>22</b>
Uključivanje i isključivanje	22
Podešavanje jačine zvuka	23
Isključivanje mikrofona slušnih aparata	24
① Telefoniranje	25
② Slušanje muzike	29
③ Korišćenje kao daljinski mikrofon	31
④ Korišćenje kao daljinski upravljač	34
<b>Važne informacije o bezbednosti</b>	<b>35</b>
Lična bezbednost	35
Bezbednost proizvoda	42

<b>Važne informacije</b>	<b>45</b>
Namena	45
Pregled indikatora statusa i napajanja	46
Objašnjenje simbola	50
Održavanje i čuvanje	52
Tehničke informacije	53
Informacije o odlaganju na otpad	55
Informacije o usklađenosti	56

# Pre nego što počnete



## OPREZ

Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo i poštujujte informacije o bezbednosti koje su navedene u ovom dokumentu da biste izbegli oštećenja ili povrede.

## Uvod


StreamLine Mic koristi Bluetooth®\* tehnologiju za sledeće funkcije.

\* Reč i logotipi Bluetooth su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc., a svaka upotreba tih zaštitnih znakova od strane zvaničnog proizvođača je pod licencama. Drugi zaštitni znakovi i robne marke su u vlasništvu samih vlasnika.

## 1 Slušalice za pametne telefone

Zvukovi sa vašeg smart telefona će se preneti na vaše slušne aparate preko StreamLine Mic. StreamLine Mic hvata vaš glas i prenosi ga na smart telefon.


Pročitajte više u odeljku „Telefoniranje“.

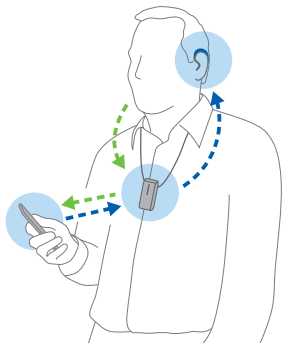

## 2 Slušalice za muziku

Muzika sa vašeg smart telefona ili drugog Bluetooth uređaja će se preneti na vaše slušne aparate preko StreamLine Mic.


Pročitajte više u odeljku „Slušanje muzike“.

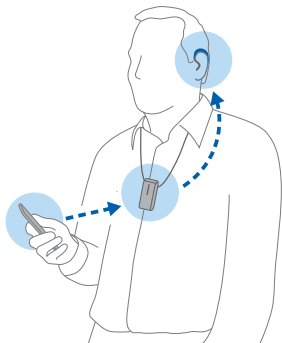

### 3 Daljinski mikrofon

Glas izabranog govornika će se bežično preneti **sa** StreamLine Mic **na** vaše slušne aparate.

Pročitajte više u odeljku „Korišćenje kao daljinski mikrofon“.

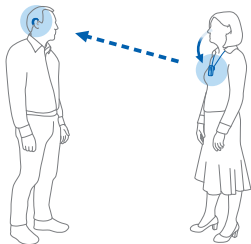




#### **4 Daljinski upravljač**

Kada StreamLine Mic ne prenosi zvuk, može se koristiti kao daljinski upravljač za vaše slušne aparate.






Pročitajte više u odeljku „Korišćenje kao daljinski upravljač“.

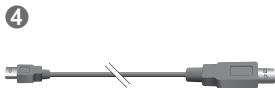
## U sadržaju paketa

- 1 StreamLine Mic
- 2 Trake (različite dužine)
- 3 Torbica
- 4 USB kabl za punjenje
- 5 USB kabl za napajanje i utikač (specifičan za zemlju)



## Komponente


- 1 Mikrofoni
- 2 Indikator napajanja 
- 3 Indikator statusa 
- 4 Štipaljka (rotirajuća)
- 5 Višenamensko dugme 
- 6 Dugmad za jačinu zvuka  i 
- 7 USB priključak za punjenje

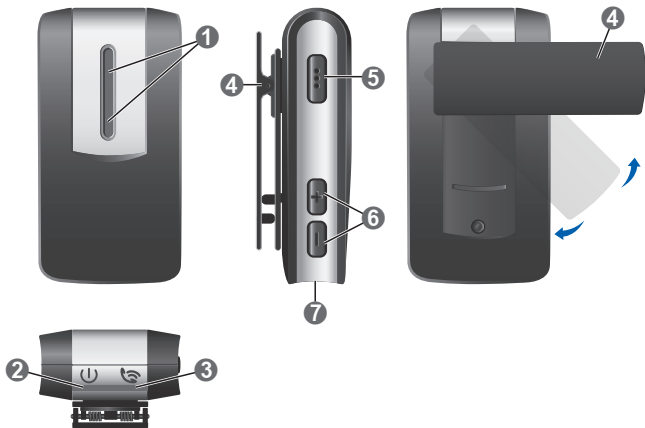

# Prvi koraci


## Punjenje

StreamLine Mic se isporučuje delimično napunjen. Napunite potpuno pre prvog korišćenja.

Kada je indikator napajanja  crvene boje preostalo vam je približno 30 minuta vremena protoka.



Indikator napajanja prikazuje status punjenja:

	Opis
Crveno	Baterija je slaba
Trepćuće zeleno	Punjenje (StreamLine Mic uključeno)
Trepćuće narandžasto	Punjenje (StreamLine Mic isključeno)
Zeleno bleđi	Punjenje je dovršeno (StreamLine Mic uključeno)
Narandžasto	Punjenje je dovršeno (StreamLine Mic isključeno)

Dodatne informacije:

- Za potpuno punjenje baterije obično su potrebna 2 sata.
- Uverite se da je strujni utikač lako dostupan da bi mogao da se odvoji od napajanja ako je potrebno.



### **OBAVEŠTENJE**

- ▶ Prilikom punjenja, indikator punjenja treba da bude osvetljen kao što je opisano u ovom korisničkom vodiču. Ako indikator punjenja nije osvetljen, prekinite vezu uređaja sa punjačem i Posavetujte se sa stručnjakom za negu sluha.





### **OBAVEŠTENJE**



- ▶ Prilikom punjenja StreamLine Mic koristite obezbeđeni originalni izvor napajanja 5,0 V/1A, CE i sigurnost označen sa.



## Uparivanje slušnih aparata

Vaši slušni aparati se moraju **jednom** upariti sa StreamLine Mic. Nakon toga, uparivanje se čuva u slušnim aparatima i pamti se svaki put kada se uključe.

- ▶ Osigurajte da je StreamLine Mic isključen: Držite dugme  pritisnuto dok se indikator napajanja  ne isključi. Za to treba oko 6 sekundi.
- ▶ Isključite i ponovo uključite slušne aparate:  
Otvorite i zatvorite odeljke za bateriju. Ako vaši slušni aparati nemaju odeljak za bateriju, isključite i uključite ih kako je opisano u korisničkom uputstvo slušnih aparata. Slušni aparati sada su spremni za uparivanje. Imate 3 minuta da završite uparivanje.

- ▶ Uključite StreamLine Mic: Držite dugme  pritisnuto dok indikator napajanja  ne postane zelen. Za to treba oko 3 sekunde.

Indikator statusa  treperi žuto.

- ▶ Stavite oba slušna aparata blizu StreamLine Mic (maksimalno rastojanje 20 cm ili 8 inča). Proces uparivanja automatski počinje. Uparivanje je završeno kada indikator statusa svetli žuto.



## Uparivanje vašeg smart telefona ili muzičkog plejera

Vaš smart telefon (ili muzički plejer) se mora upariti samo jednom sa StreamLine Mic. Nakon toga se veza automatski uspostavlja kada se StreamLine Mic uključi i kada je u radnom dometu.

- ▶ Držite dugme  i  istovremeno dok indikator statusa  počne da treperi plavo. Za to treba oko 6 sekundi.

StreamLine Mic je spreman za uparivanje. Imate 3 minuta da završite uparivanje.

- ▶ Podesite vaš smart telefon ili muzički plejer na „pretraživanje drugih Bluetooth uređaja“. Pogledajte priručnik za uređaj.

- ▶ Na vašem smart telefonu ili muzičkom plejeru, izaberite „StreamLine Mic“ sa liste detektovanih uređaja.
- ▶ Ako treba, unesite PIN „0000“.






Uparivanje je završeno kada indikator statusa  svetli plavo.

#### Dodatne informacije

- StreamLine Mic se može **upariti** sa do osam Bluetooth uređaja. Ali samo po jedan uređaj može biti **povezan** u određenom trenutku.
- Kada je uparen sa više uređaja:
  - StreamLine Mic će se povezati sa prvim uređajem kojeg detektuje.
  - Da biste se prebacili na drugi uređaj, deaktivirajte Bluetooth na uređajima koje ne želite koristiti u tom trenutku.

## Brisanje uparivanja

Da biste obrisali sva uparivanja StreamLine Mic sa smart telefonima i muzičkim plejerima:



- ▶ Isključite StreamLine Mic: Držite dugme  pritisnuto dok se indikator napajanja  ne isključi. Za to treba oko 6 sekundi.
- ▶ Istovremeno pritisnite dugme  i dugme  i dugme  10 sekundi.


Kada se uparivanja obrišu, indikator statusa treperi crveno. Vaši slušni aparati ostaju upareni sa StreamLine Mic.

# Svakodnevna upotreba



## Uključivanje i isključivanje

Uključivanje:

- ▶ Držite dugme  pritisnuto dok indikator napajanja  ne postane zelen. Za to treba oko 3 sekunde.

Indikator statusa  treperi žuto dok se slušni aparati ne povežu.

Isključivanje:

- ▶ Držite dugme  pritisnuto dok se indikator napajanja  ne isključi. Za to treba oko 6 sekundi.


## Podešavanje jačine zvuka

Kratko pritisnite  ili  za podešavanje jačine zvuka.



U zavisnosti od tipa slušnog aparata, jačina zvuka se podešava na sledeći način:

- **Mogućnost 1:** Dok se zvuk prenosi, podešava se samo zvuk sa StreamLine Mic (telefonski poziv, govor ili muzika). Dok se zvuk ne prenosi, jačina zvuka slušnih aparata se podešava.
- **Mogućnost 2:** Zvuk sa StreamLine Mic (telefonski poziv, govor ili muzika) i jačina zvuka slušnih aparata se zajedno podešavaju.

## Isključivanje mikrofona slušnih aparata

Držite dugme  pritisnuto 3 sekunde da biste isključili mikrofone slušnih aparata. Samo se zvuk sa StreamLine Mic reprodukuje u vašim slušnim aparatima.

U zavisnosti od tipa slušnog aparata, možete uključiti zvuk mikrofona slušnih aparata na sledeći način:

- Mogućnost 1: Držite dugme  pritisnuto oko 3 sekunde.
- Mogućnost 2: Kratko pritisnite .


Ta funkcija možda neće biti dostupna kada se StreamLine Mic koristi kao daljinski mikrofoni.



## 1 Telefoniranje

Preduslovi: StreamLine Mic mora biti povezan sa smart telefonom i mora se ispravno nositi.

### Ispravno nošenje StreamLine Mic

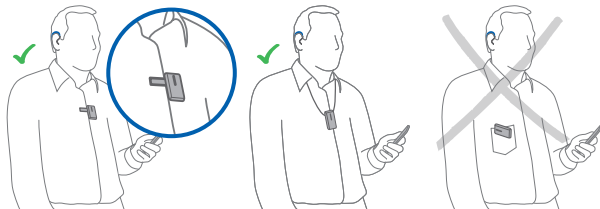





StreamLine Mic treba nositi kao što je prikazano na slikama za najbolje performanse. Važno je da je mikrofonski StreamLine Mic usmeren prema vašim ustima i da StreamLine Mic ne prekriva odevu i sl.

Maksimalno rastojanje:


- Smart telefon — StreamLine Mic: 10 m (33 ft)
- Slušni aparati — StreamLine Mic: 2 m (6,5 ft)

## Primanje poziva

Čućete ton zvona u vašim slušnim aparatima. Indikator statusa  treperi zeleno.


- ▶ Da biste primili/završili poziv, kratko pritisnite  ili prihvatite/završite poziv preko vašeg smart telefona. Dok telefonirate, indikator statusa  je zelene boje.
- ▶ Da biste odbacili poziv, držite dugme  pritisnuto oko 3 sekunde.

## Telefoniranje

Kada zovete nekog sa vašim povezanim smart telefonom, poziv se automatski prenosi u vaše slušne aparate. Dok telefonirate, indikator statusa  je zelene boje.


Ta funkcija nije dostupna kada se StreamLine Mic koristi kao daljinski mikrofoni.

## Dodatne informacije

- **Glasovno pozivanje:** Kada ste povezani sa smart telefonom, dvaput pritisnite  da biste aktivirali glasovno pozivanje (ako je podržano na smart telefonu).
- Za ovaj tip veze, StreamLine Mic koristi Bluetooth Hands-Free Profile (HFP).

## 2 Slušanje muzike

Ako je StreamLine Mic povezan sa muzičkim plejerom preko Bluetooth, muzika će se automatski reprodukovati na vašim slušnim aparatima. Ne morate raditi ništa na StreamLine Mic.


Dok se muzika prenosi, indikator statusa  svetli narandžasto.

Maksimalna rastojanja:

- Muzički plejer — StreamLine Mic: 10 m (33 ft)
- Slušni aparati — StreamLine Mic: 2 m (6,5 ft)

## **Pokretanje/zaustavljanje muzike**


- ▶ Koristite vaš smart telefon ili muzički plejer za pokretanje/zaustavljanje muzike.

Da biste zaustavili muziku, takođe možete kratko pritisnuti  na StreamLine Mic.


## **Dodatne informacije**

- Za ovaj tip veze, StreamLine Mic koristi Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).
- Ako se muzika prenosi sa vašeg smart telefona, bićete obavešteni o dolaznim pozivima tokom reprodukcije muzike.

### 3 Korišćenje kao daljinski mikrofon

Funkcija daljinskog mikrofona ne počinje automatski. Morate se prebacivati na režim daljinskog mikrofona sa dugmetom .

#### Ispravno nošenje StreamLine Mic

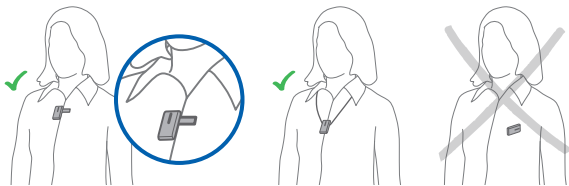


Govornik treba nositi StreamLine Mic kao što je prikazano na slikama za najbolje performanse. Važno je da je mikrofonski usmeren prema ustima govornika i da StreamLine Mic ne prekriva odeća i sl.

Maksimalno rastojanje:

- Slušni aparati — StreamLine Mic: 20 m (66 ft)

### Uključivanje daljinskog mikrofona



- ▶ Pritisnite  oko 3 sekunde.

Indikator statusa  svetli magenta. Zvuk potvrde se reprodukuje u vašim slušnim aparatima.

Daljinski mikrofoni su uključeni. Govor osobe koja nosi StreamLine Mic se prenosi direktno u vaše slušne aparate.



## Isključivanje daljinskog mikrofona

- ▶ Držite dugme  pritisnuto oko 3 sekunde.  
Indikator statusa  svetli plavo (povezan sa smart telefonom) ili žuto (nije povezan sa smart telefonom).

## Dodatne informacije

- Kada koristite StreamLine Mic kao daljinski mikrofoni, nema veze sa smart telefonom. Nećete biti obavješteni o dolaznim pozivima.
- StreamLine Mic ima usmerene mikrofoni, tj. mikrofoni koji hvataju zvuk iz određenog pravca.

#### **4 Korišćenje kao daljinski upravljač**

StreamLine Mic se takođe može koristiti kao daljinski upravljač za vaše slušne aparate: Možete podesiti jačinu zvuka (pogledajte odeljak „Podešavanje jačine zvuka“), isključiti mikrofone slušnih aparata (pogledajte odeljak „Isključivanje mikrofona slušnih aparata“) ili se prebaciti na sledeći slušni program (pogledajte ispod).

Maksimalna rastojanja:

- Slušni aparati — StreamLine Mic: 2 m (6,5 ft)

#### **Prebacivanje na sledeći slušni program**

▶ Držite dugme  pritisnuto oko 3 sekunde.

Ta funkcija nije dostupna kada se StreamLine Mic koristi kao daljinski mikروفon.

# Važne informacije o bezbednosti

## Lična bezbednost



### **UPOZORENJE**

Opasnost od gušenja!

Vaš uređaj sadrži male delove koji se mogu progutati.

- ▶ Slušne aparate, baterije i pribor držite van domašaja dece i mentalno obolelih osoba.
- ▶ Ukoliko se delovi progutaju, odmah se obratite lekaru ili bolnici.



## **UPOZORENJE**

Opasnost od davljenja!

- ▶ Proverite da traka za nošenje nije uhvaćena, npr. pokretnim mehaničkim delovima mašina.
- ▶ Koristite samo isporučeni sigurnosni kaiš za nošenje. On će se automatski odvojiti ako se zapetlja.
- ▶ Traku za nošenje ne koristiti kod dece ispod dvanaest godina.



### **UPOZORENJE**

Opasnost od strujnog udara!

- ▶ Ne koristite vidno oštećene uređaje i vratite ih na prodajno mesto.



### **UPOZORENJE**

Imajte na umu da neovlašćene izmene proizvoda mogu prouzrokovati štetu na proizvodu ili da dovedu do povreda.

- ▶ Koristite samo odobrene delove i pribor. Za podršku se obratite svom specijalisti za sluh.



## **UPOZORENJE**

Bezbednost punjenja baterija pomoću USB konektora određuje spoljna oprema.

- ▶ Kada je USB konektor povezan na spoljnu opremu koja je priključena u zidnu utičnicu, ova oprema mora da bude odobrena od strane UL ili da bude u skladu sa standardima IEC 60065, IEC 60950 ili drugim ekvivalentnim bezbednosnim standardima.



## **UPOZORENJE**

Bezbednost korišćenja ovog uređaja kada je povezan na spoljnu opremu (preko pomoćnog kabla za ulaz, putem USB kabla ili direktno) određuje spoljna oprema.

- ▶ Kada je povezan na spoljnu opremu koja je priključena u zidnu utičnicu, ova oprema mora da bude u skladu sa standardima IEC 60065, IEC 60950 ili drugim ekvivalentnim bezbednosnim standardima.



## **UPOZORENJE**

Opasnost od eksplozije ukoliko se nepravilno rukuje punjivom baterijom.

- ▶ Nemojte kratkospajati, bušiti, lomiti i rastavljati punjivu bateriju.
- ▶ Ne stavljajte u pećnicu ili u vatru.
- ▶ Ne potapajte ga u vodu.
- ▶ Punjivu bateriju puniti na temperaturama između 0°C i 45°C.
- ▶ Za popravku ili zamenu punjive baterije, vratite uređaj svom specijalisti za sluh.





## **UPOZORENJE**

### Aktivni implanti

- ▶ Oprezno rukujte aktivnim implantima. Ako imate aktivni implant, obratite se proizvođaču vašeg implantiranog uređaja za informacije o riziku od smetnji.



## **UPOZORENJE**

Ovaj uređaj može izazvati smetnje na opremi za merenje i elektronskoj opremi.

- ▶ Nemojte koristiti uređaj u avionima ili u oblastima gde se koristi osetljiva elektronska oprema ili oprema za održavanje života.



## **UPOZORENJE**

Opasnost od eksplozije!

- ▶ Ne koristite uređaj u eksplozivnim atmosferama (npr. u oblastima miniranja).

## **Bezbednost proizvoda**



### **OBAVEŠTENJE**

- ▶ Zaštitite uređaj od visoke temperature. Ne odlažite ga na direktnoj sunčevoj svetlosti.



### **OBAVEŠTENJE**

- ▶ Zaštitite uređaje od visoke vlažnosti.



## **OBAVEŠTENJE**

- ▶ Ne sušite uređaje u mikrotalasnoj rearni.



## **OBAVEŠTENJE**

Različite vrste jakog zračenja, npr. tokom rendgenskog ili MR snimanja glave, mogu oštetiti uređaje.

- ▶ Nemojte koristiti uređaje tokom ovih ili sličnih postupaka.  
Slabija zračenja, koja emituje npr. radio oprema ili bezbednosni sistem na aerodromu, ne oštećuje uređaje.



U nekim zemljama postoje ograničenja za korišćenje bežične opreme.

► Dalje informacije potražite od lokalnih vlasti.



### **OBAVEŠTENJE**

Vaši uređaji su dizajnirani u skladu sa međunarodnim standardima o elektromagnetnoj kompatibilnosti, ali se mogu javiti smetnje sa obližnjim elektronskim uređajima. U tom slučaju, udaljite se od izvora smetnji.

# Važne informacije

## Namena

Ovaj uređaj je namenjen kao bežični prijemnik i predajnik zvuka između slušnih aparata i okoline, uključujući i govorne i bežične audio uređaje. Ovaj uređaj takođe omogućava nosiocima bežičnih slušnih aparata da kontrolišu funkcionalnost svojih slušnih aparata.


Namenjen je za upotrebu od strane dece (> 36 meseci) i odrasle osobe zajedno sa njihovim slušnim aparatima.

## Pregled indikatora statusa i napajanja


### Indikator statusa

#### Opis


---

 Treperi žuto  
Traži slušne aparate.

---

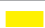 Žuta  
Režim mirovanja: Povezan sa slušnim aparatima.  
**Nije** povezan sa smart telefonom ili drugim uređajem.

---

 Treperi plavo  
StreamLine Mic je vidljivo za smart telefon radi uparivanja.

---

## Opis

---



Plava boja

Telefonski režim: Povezan sa smart telefonom.

---



Treperi zeleno

Dolazni poziv.

---



Zeleno

Poziv u toku.

---



Narandžasto

Prenos muzike.

---



Magenta

Režim daljinskog mikrofona.

---

## Opis



---

-  Treperi magenta  
Ponovo povezivanje daljinskog mikrofona.
- 

## Indikator napajanja

### Opis


---

-  Crveno  
Baterija na izmaku.
  -  Treperi zeleno  
Punjenje dok je uključen.
-




## Opis


---

 Zeleno se polako isključuje  
Punjenje je završeno i StreamLine Mic je uključen.

---

 Zeleno  
Uključeno, ne puni se.

---

 Treperi narandžasto  
Punjenje dok je isključen.

---

 Narandžasto  
Punjenje je završeno i StreamLine Mic je isključen.

---

## Objašnjenje simbola

### Simboli korišćeni u ovom dokumentu

---



Ukazuje na situaciju koja bi mogla dovesti do ozbiljnih, umerenih ili manjih povreda.

---



Ukazuje na moguću materijalnu štetu.

---



Savet i predlozi u vezi sa boljim korišćenjem uređaja.

---

### Simboli na uređaju ili pakovanju

---



CE oznaka za usklađenost, potvrđuje usklađenost sa određenim evropskim direktivama, pogledajte odeljak „Informacije o usklađenosti“.

---

## Simboli na uređaju ili pakovanju

---



Oznaka za usklađenost uređaja sa regulativom o EMK i radio komunikacije, Australija, pogledajte odeljak „Informacije o usklađenosti“.

---



Ukazuje na zvaničnog proizvođača uređaja.

---



Nemojte odložiti uređaj sa opštim kućnim otpadom. Pročitajte više u odeljku „Informacije o odlaganju na otpad“.

---



Pročitajte i pratite uputstva u korisničkom priručniku.

---

## Održavanje i čuvanje



### OBAVEŠTENJE

- ▶ Ne potapajte vaš aparat u vodu!
  - ▶ Ne čistite vaš aparat alkoholom ni benzinom.
- 
- ▶ Uređaj po potrebi čistite maramicom.
  - ▶ Izbegavajte abrazivne tečnosti za čišćenje sa aditivima kao što su limunska kiselina, amonijak, itd.



## Tehničke informacije

### Kompatibilni slušni aparati

StreamLine Mic radi sa našim specifičnim bežičnim slušnim aparatima. Vaš specijalista za sluh će vas posavetovati o kompatibilnim modelima.

### Uslovi rada, transporta i skladištenja

#### Uslova rada

---

Temperatura	5 do 40 ° c (41 do 104 °F)
-------------	----------------------------

---

Relativna vlažnost	15 do 93%, nekondenni
--------------------	-----------------------

---

Atmosferski pritisak	700 do 1060 hPa
----------------------	-----------------

---

Tokom proširenih perioda transporta i skladištenja molimo vas da posmatrate sledeće uslove:

### **Transport i skladištenje**

---

Temperatura	-20 do 70 ° c (-4 do 158 °F)
Atmosferski pritisak	700 do 1060 hPa

---



#### **UPOZORENJE**

Rizik od povrede, požara ili eksplozije tokom isporuke.

- ▶ Isporučite StreamLine Mic u skladu sa lokalnim propisima.

Za druge delove, kao što su instrumenti za slušanje, mogu se primeniti i drugi uslovi.

## Tehnički podaci za napajanje

Ulazni napon:	100-240 V AC
Ulazna struja:	maks. 0,2 A pri 100 V AC
Ulazna frekvencija:	47-63 Hz
Izlazni napon:	5 V DC
Izlazna struja:	maks. 1 A

## Informacije o odlaganju na otpad

Reciklirajte uređaje, dodatnu opremu i ambalažu u skladu sa lokalnim propisima.

## **Informacije o usklađenosti**

CE oznaka ukazuje na usklađenost sa sledećim evropskim direktivama:

- 93/42/EEC o medicinskim uređajima
- 2014/53/EU RED o radio opremi
- 2011/65/EU RoHS o ograničenju upotrebe opasnih supstanci

Kompletan tekst izjave o usaglašenosti nalazi se na [www.signia-hearing.com/doc](http://www.signia-hearing.com/doc).

## **Bežična funkcija**

Ovaj uređaj sadrži radio predajnik koristeći Bluetooth EDR, Bluetooth low energy (BLE) i vlasničku radio tehnologiju kratkog dometa koji rade na 2,4 GHz. Radijski predajnik




od 2,4 GHz je slab i uvek je ispod 17 dBm e.i.r.p. u ukupne izračene snage.

Ovaj uređaj je usklađen sa međunarodnim standardima koji se odnose na radio predajnike, elektromagnetnu kompatibilnosti i izloženost ljudi.

Informacije o usaglašenosti sa FCC i ISED možete naći na poleđini uređaja.



ACMA oznaka usklađenosti  ukazuje na usklađenost sa standardima Australijske uprave za komunikacije i medije (ACMA) o elektromagnetnim smetnjama.

Uređaji sa FCC oznakom su usklađeni sa standardima FCC-a o elektromagnetnim smetnjama.

Ovaj digitalni aparat klase B je usklađen sa kanadskim standardom ICES-003.

Ovaj uređaj je usklađen sa FCC pravilnikom, deo 15 i sa RSS-om oslobođenim od licence ISED-a.

Rad uređaja zavisi od sledeća dva uslova:

- ovaj uređaj ne sme prouzrokovati štetnu interferenciju i
- ovaj uređaj mora da prihvati svako primljeno ometanje, uključujući i ometanje koje može prouzrokovati neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i potvrđeno je da je usklađena sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, shodno FCC pravilniku, deo 15. Ova ograničenja su projektovana da obezbede razumnu zaštitu od štetnog ometanja u kućnoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može emitovati

radio-frekventnu energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu sa uputstvima, može prouzrokovati štetna ometanja radio komunikacija. Međutim, ne postoji garancija da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema prouzrokuje štetnu interferenciju kod radio ili televizijskog prijema, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se podstiče da pokuša da popravi interfejs putem jedne ili više sledećih mera:

- Preusmeravanje ili premeštanje prijemne antene.
- Povećanje razmaka između opreme i prijemnika.
- Povezivanje opreme na utičnicu koja se ne nalazi u strujnom krugu u koji je povezan prijemnik.
- Savetovanje sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem radi pomoći.

Upozorenje FCC-a: Sve promene ili modifikacije, koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost, mogla bi da poništi pravo korisnika da koristi ovu opremu.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





**Zvanični proizvođač**

WSAUD A/S

Nymoellevej 6

DK-3540 Lyngø

Denmark

Document No. 03384-99T03-8100 BHS

Order/Item No. 109 520 49

Master Rev04, 01-2021

© 02.2021, WSAUD A/S. All rights reserved



**[www.signia-hearing.com](http://www.signia-hearing.com)**